19 日本国特許庁 (JP/

①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U)

昭57—57802

MInt. Cl.3 A 61 B 1/00 17/36

識別記号

庁内整理番号 7058-4C 7058-4C

❸公開 昭和57年(1982)4月5日

審查請求 未請求

(全 2.頁)

❷内視鏡用高周波凝固電極

②実

BZ55-135037

後出

昭55(1980) 9 月22日

の考案 者

此村優

八王子市大和田町 4 丁目22番13

⑪出 願 人 オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番

2号

四代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

砂実用新案登録請求の範囲


内視鏡のチャンネル内に挿通可能な挿入電極か ら構成されてなる内視鏡用高周波殻固電極におい て、上記挿入電極は削ることができる絶縁部材で 被覆した複数の長尺な棒状の電極素材を並設して なり、各電極素材の先端を絶縁部材の先端部に露 出したことを特徴とする内視鏡用高周波艇固電極。 図面の簡単な説明・

第1図は従来のピンセットタイプの高周波製固


電極を示す側面図、第2図はその異なる従来のピ ンタイプの高周波擬固電極を示す斜視図、第3図 はこの考案の第1の実施例の高周波疑固電極を示 す斜視図、第4図はその挿入電極の先端部を示す 斜視図、第5図はこの考案の第2の実施例を示す 部分斜視図である。

1 ……挿入電極、4 ……電極素材、5 ……可撓 絶縁管(絶縁部材)。


第1図

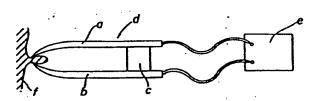


第2図

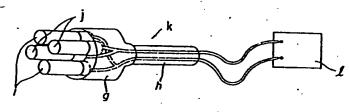


第3図

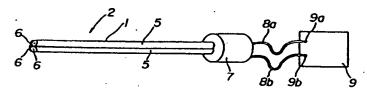

第4図

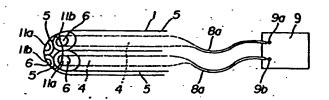

第5図

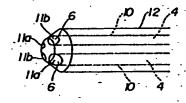

公開実用 昭和57—57802



実川新案登錄願6)

(4,000円)

昭和 55年. 9. 於2 日

特許庁長官 島 田 春 樹 殿

1. 考案の名称

ナイシャョウョウコウジウへやコウコ デンキョク 内視鏡用高周波緩固電極

2. 考 案 者

ヘチオクシ オオワ ダ 東京都八王子市大和田町 4丁目22番13号

コノ 47

便

3. 実用新案登録出願人

東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 (037) オリンパス光学工業株式会社 代表者 北 村 茂 男

4. 代理人

住所 東京都港区虎ノ門1丁目26番5号 第17森ビル 〒 105 電話03 (502) 3181 (大代表)

氏名 (5847) 和聖士 鈴 江 武 彦

(ほか 2名)

対する Horac=

1. 考案の名称

内视鏡用高周波凝固電極

2. 実用新案登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明

この考案は、生体の一部の組織を模固させて たとえば毛細血管からの出血を止血するに使用 される内視鏡用高周波模固電板に関する。

この種の高周波凝固電極にあっては、一般に 単極型が使用されている。この単極型のものは、 一方の電極を凝固すべき個所に弾入し、他方の 電極は患者の体外表面に接触させる板状電衝 (対極板)となっている。

しかしながら、このような単極型の電板では、 単極子より流入する電流が対極板に向って拡散 的に流れるため、発熱分布も散逸的であり、微 小凝固範囲における凝固のコントロールが困難 で、また異常電流により火傷などの危険性も伴 うものであった。

しかしながら、この種の高高波楽固電極にあっては、使用するたびに電極素材は、i、i、であるいは配称という、i、が発力であるいな発力である。 発熱の電極のから、 ないのののののののでは、 がいったのののでは、 使用では、 使用では、 使用では、 使用では、 使用では、 使用では、 使用では、 使用では、 使用では、 使用ではる。

この考案は上記事情に着目してなされたもの

で、その目的とするところは、挿入電極を長尺な棒状構造にして、露出した電極面が使用により被って性能劣化をきたしても、その性能を切りにしてきるとができるようにできるとである。 は、類性能のもとであるとができるように が、対したのである。

司

一方、図中9は高周波電源であり、この高周波電源9に設けた端子9a,9bルンで高周接続ケーブルコード8a,8bを外して高周波電流を給電することにより、上電電磁楽材4…の電極面6…にその降り合う電を面6,6を一対とした極性が2組形成されるよ

222X

りになっている。

しかして、使用により御入電極1の電極面6 …がこけついたり、すりへったりして電極1の 性能に劣化をきたしたような場合には、可撓絶 様管5…および電極素材1…の先端部を削れば、 初野時と同様な歯唇面6の断面形状および電極 素材4…の配置が得られることになる。

したがって、性能が劣化して**も**挿入電極1の 先端部を削るだけで、その性能を復帰させるこ The state of the s

とができることになり得、初期性能のもとで再 使用することができるものである。

また、挿入電極1は絶縁が施された棒状の電 を素材 4 …を並設するという簡単な構成である から、その製造が簡単であり、また先端部にな から、その変化はないので、内視鏡用としる いるに際し最も適したものであるといえる である。

さらにまた挿入電極 1 はパイポーラタイプであるから、異常電流による火傷などの危険性がなく、安全性についても優れたものだといえる。

なお、との考案は上述した第1の実施例に限 定されるものではなく、たとえば第5図に示す 第2の実施例のようにしてもよい。

すなわち、第2の実施例は、4個の素材嵌挿路10…を有して可撓絶縁管12を一体に成形し、この可撓絶縁管12の各案材嵌挿路10内に電極素材 4 …を嵌挿するようにしてもので、このように挿入電極1を構成するようにしたま施例と同様の入電極1を構成しても上述した実施例と同様の

効果を奏するものである。

なお、上述した全ての実施例において、挿入 電極を 4 本の電極素材から構成したが、バイポーラタイプの電極となり得るものであれば、何 本の電極素材から挿入電極を構成してもよいも のである。

以上では、複数をできるとは、複数を表によっては、できませんが、できませんが、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは

したがって、性能が劣化しても挿入電極の先端部を削ることにより、その性能を初期性能にまで復帰させることができることになり得、初期性能のもとでの再使用ができるものである。

また、挿入電極は電極素材を絶縁材を介して 並設するという簡易な様成であるから、その製造は簡単であり、しかも先端側において太さの 変化ない細径とすることができるので、内視鏡 用としては最も好適なものである。

さらにまた、挿入電極はバイポーラタイプで あるから、異常電流による火傷などの危険性が なく、安全性の上でも優れるものである。


4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来のピンセットタイプの高周波察 固電極を示す側面図、第2 図はその異なる従来 のピンタイプの高周波察固電極を示す斜視窓、 第3 図はこの考案の第1 の実施例の高周波疑固 電極を示す斜視図、第4 図はその挿入電極の先 端部を示す斜視図、第5 図はこの考案の第2の 実施例を示す部分斜視図である。

1 ··· 挿入電優、 4 ··· 電極業材、 5 ··· 可挽柜錄管(舱級部材)。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

公開実用 昭和5, 一 57802

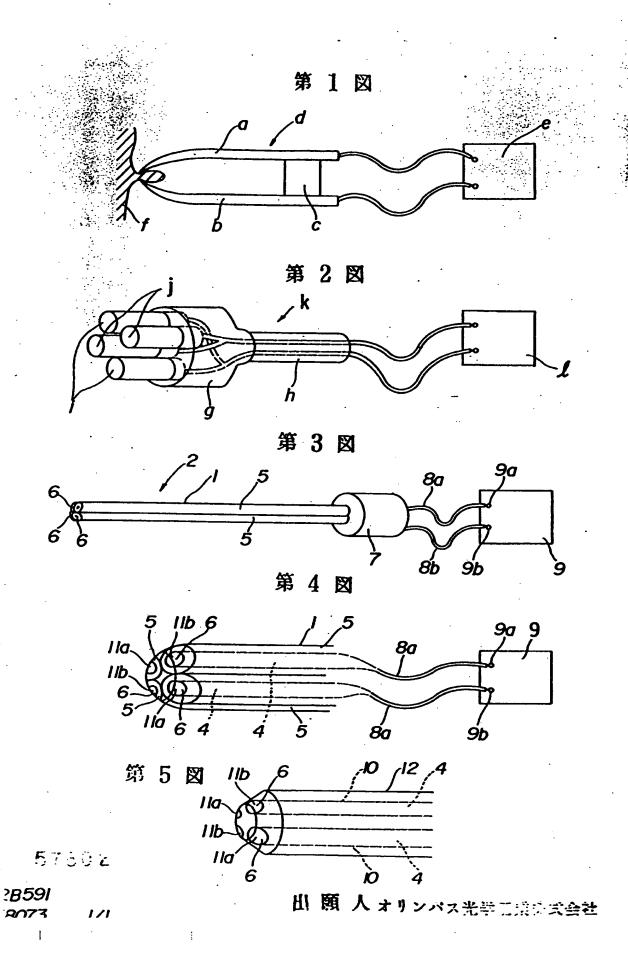

5. 添付書類の目録

 (1) 委任 状
 1 通

 (2) 明 細 書
 1 通

 (3) 図 面
 1 通

 (4) 願書副本
 1 通

6. 前記以外の考案者、実用新案登録出願人、代理人

代 理 人

- 住所 東京部港区東ノ門1丁目26番5号 第17森ビル

氏名 (8461) 弁理士 村 松 貞 男

住所 同 所

氏名(6881) 介理士 坪 井 淳

PARTIAL TRANSLATION OF JAPANESE UNEXAMINED U.M. PUBLICATION (KOKAI) No. 57-57802

Title of the Device: High frequency Coagulation Electrode

used for an Endoscope

Publication date: April 5, 1982

U.M. application No. 55-135037

Filing date: September 22, 1980

Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. (Olympus Kogaku Kogyo)

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Figure 1 is a side view of a conventional tweezer-type high frequency coagulation electrode as one example;

Figure 2 is a perspective view of a conventional tweezer-type high frequency coagulation electrode as another example;

Figure 3 is a perspective view of a high frequency coagulation electrode according to one embodiment of the present device;

Figure 4 is a perspective view of a head portion of the coagulation electrode to be inserted; and

Figure 5 is a perspective view of a head portion of the coagulation_electrode to be inserted, according to another embodiment of the present device.

In the drawings:

- a, b: pair of electrode elements
- c: supporting member
- d: electrode to be inserted
- e: high frequency power source
- f: bio-tissue

g: electrode supporting member

h: flexible tube

i, j: short electrode pins

k: electrode to be inserted

1: high frequency power source

1: electrode to be inserted

2: high frequency coagulation electrode used for an endoscope

4: long electrode element

5: flexible insulating tube

6: electrode surface

7: distal end

8a, 8b: connection cables

9: high frequency power source

9a, 9b: terminals

10: electrode element path

11a, 11b: a pair of poles

12: flexible insulating tube

A SCOPE OF CLAIM FOR DEVICE

A high frequency coagulation electrode used for an endoscope, which is formed of an electrode which can be inserted into a channel of an endoscope, characterized in that the electrode has a plurality of long bar-type electrode elements which are provided in parallel and each of which is coated by an insulating member which can cut off, and the head portion of each of the electrode elements is exposed at a head portion of the insulating member.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHÓTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARF POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)